


waterpik®

Waterpik® Water Flosser Model WP-160

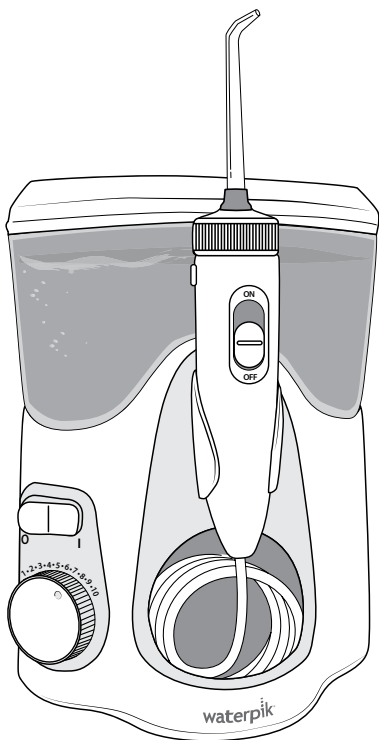

Waterpik® Water
Flosser Model WP-160

.....
www.waterpik.com

OSTRZEŻENIE

Korzystając z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w pobliżu dzieci, należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych środków ostrożności. **Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją!**

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

**PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
SPRAWDŹ CZY PRZEWÓD
ZASILANIA NIE JEST USZKODZONY**

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem nie należy:

- Dotykać wtyczki mokrymi rękoma
- Używać irygatora podczas kąpieli
- Przechowywać urządzenia w miejscach narażonych na zalanie (np. umywalka)
- Umieszczać urządzenia w wodzie lub innym płynie (UWAGA: w przypadku znalezienia się urządzenia w wodzie należy natychmiast odłączyć wtyczkę)

Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania

UWAGA:

Jeżeli urządzenie zostanie zdemontowane (z jakiegokolwiek powodu) gwarancja traci ważność!
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, oparzenia lub innych obrażeń ciała:


- Nie należy podłączać urządzenia do napięcia innego niż napięcie określone na urządzeniu.
- Nie korzystaj z irygatora jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa właściwie, urządzenie zostało uszkodzone lub upuszczone do wody.
- Nie kieruj strumienia wody do ucha, nosa, pod język, ani inne delikatne miejsca. Urządzenie jest zdolne do wytworzenia silnego ciśnienia, które może zranić te miejsca.
- Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek i akcesoriów zalecanych przez Water Pik, I nc.
- Nie umieszczaj w wężyku i otworach irygatora żadnych przedmiotów, które do tego nie służą.
- Trzymaj kabel zasilający z dala od wszelkich źródeł gorąca i nagranych powierzchni.

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w pobliżu używania produktów w aerozolu i miejscach, gdzie podaje się tlen.
- Nie korzystaj z olejków eterycznych, jodyny i innych nierozpuszczalnych w wodzie substancji. Mogą one uszkodzić urządzenie i skrócić jego trwałość. Korzystanie z takich produktów może skutkować utratą gwarancji.
- Przed korzystaniem z urządzenia usuń wszelkie ozdoby nazębne.
- Nie należy używać produktu, jeśli masz otwartą ranę w jamie ustnej lub na języku.
- Jeżeli lekarz lub kardiolog zalecił ci profilaktykę antybiotykową przed zabiegami stomatologicznymi, skonsultuj się ze stomatologiem przed użyciem irygatora i innych środków higieny jamy ustnej.
- Nie należy używać produktu dłużej niż 5 minut w okresie dwóch godzin.
- Dzieci powyżej 8 lat i osoby o szczególnych potrzebach powinny zostać szczegółowo pouczone o prawidłowym korzystaniu z urządzenia i nadzorowane podczas używania irygatora.
- Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Ir ygator nie zawiera części wymagających konserwacji przez konsumenta.
- Zaleca się wypełnianie irygatora wyłącznie ciepłą wodą lub innym płynem do higieny jamy ustnej rekomendowanym przez stomatologa.

ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ


OPIS URZĄDZENIA	5
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA	6
CZYSZCZENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	8
GWARANCJA	9

1. Pokrywa zbiornika (wewnątrz - schowek na końcówki)
2. Przycisk do wyjmowania końcówki
3. Zawór zbiornika
4. Przycisk zasilania
5. Pokrętko regulacji ciśnienia
6. Końcówka
7. Obrotowe pokrętko do montowania końcówki
8. Zbiornik
9. Przycisk włączający/wyłączający przepływ wody
10. Rączka irygatora
11. Podstawa

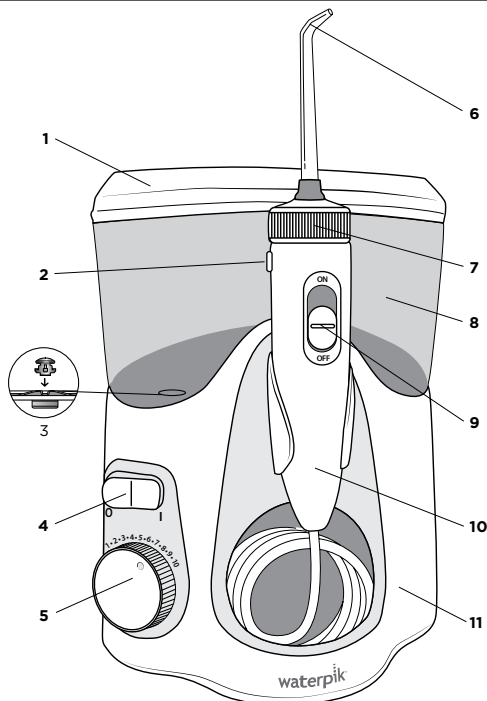

KOŃCÓWKI




- A. **Ortodontic*** - do użytku codziennego i aparatów ortodontycznych.
- B. **Pik Pocket**** - do rozwidleń i kieszonek przyzębnych.
- C. **Plaque Seeker**** - do koron, mostów, implantów i do użytku codziennego.
- D. **Toothbrush*** - do użytku codziennego.
- E. **Classic Jet**** - do codziennego użytku.
- F. **Tongue Cleaner**** - do czyszczenia języka.

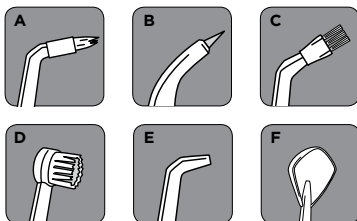

Wymienne końcówki można kupić na stronie dystrybutora www.shop-dent.pl

*Wymiana co 3 miesiące

**Wymiana co 6 miesięcy

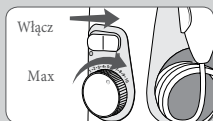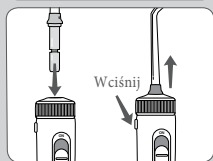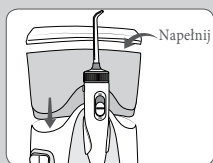

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Umieść wtyczkę przewodu do gniazda elektrycznego

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Wyjmij zbiornik i wypełnij go ciepłą wodą. Umieść zbiornik w podstawie i naciśnij, żeby się zablokował. Zakryj pokrywą.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI

Umieść końcówkę w środku rączki irygatora i dociśnij, aż końcówka się zablokuje. Aby wyjąć końcówkę z rączki irygatora, naciśnij przycisk nr 2.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przekręć pokrętło regulacji ciśnienia na najwyższy poziom, skieruj rączkę i końcówkę do umywalki. Włącz urządzenie i pozwól, aby cała woda przepłynęła przez irygator. Wyłącz urządzenie

USTAWIENIE OPTIMALNEGO CIŚNIENIA PODCZAS PIERWSZEGO UŻYCIA

Ustaw pokrętło regulacji ciśnienia (nr 5) na najniższy poziom. Stopniowo zwiększaj ciśnienie według uznania lub według zaleceń stomatologa.

REKOMENDOWANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA


Umieść końcówkę w ustach przed włączeniem urządzenia. Włącz urządzenie, pochyl się nad umywalką i przymknij usta, aby woda się nie rozpryskiwała. Pozwól, aby woda mogła swobodnie wypływać z twoich ust do umywalki. Włącz przepływ wody. Aby uzyskać lepszy rezultat czyszczenia, należy zacząć od tylnej części jamy ustnej i płynnie przechodzić w kierunku przedniej. Skieruj strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymuj ruch, na krótko, między zębami. Kontynuuj czyszczenie dopóki nie oczyścisz górnych i dolnych zębów wewnątrz i na zewnątrz.

ZAKOŃCZENIE IRYGACJI

Po zakończeniu irygacji wyłącz przepływ wody, wyłącz urządzenie, opróżnij zbiornik i wyłącz urządzenie z zasilania.


Pik Pocket®

Końcówka Pik Pocket®, do rozwidleń i kieszonek przyzębnych. Ustawić na najniższym ciśnieniu. Umieścić końcówkę przed zębami pod kątem 45 stopni i delikatnie przesuwając miękką część końcówki pod kieszeń przyzębną.

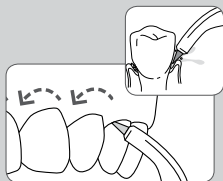


Tongue Cleaner Tip

Końcówka do czyszczenia języka (świeższy oddech). Ustawić na najniższe ciśnienie. Umieścić końcówkę na środku języka i lekko naciskając przesunąć końcówkę do przodu po języku.

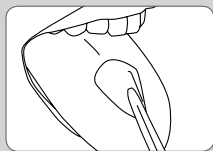


Orthodontic Tip

Końcówka ortodontyczna, do użytku codziennego i aparatów ortodontycznych. Delikatnie przesuwając końcówkę po linii dziąseł, zatrzymać na krótko i szczotkować przestrzenie międzyzębowe.

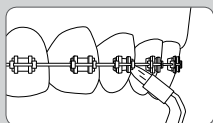


Toothbrush Tip

Końcówka - szczoteczka, do użytku codziennego. Można używać z pastą lub bez pasty. Umieścić końcówkę włosiem w kierunku linii dziąseł, używając niskiego ciśnienia, Przesuwać po zębach (podobnie jak w przypadku szczoteczki manualnej).

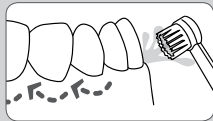

Plaque Seeker® Tip

Końcówka Plaque Seeker®, do koron, mostów, implantów i do użytku codziennego. Umieścić końcówkę aby delikatnie dotykała zębów, przesuwając wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się krótko w przestrzeniach międzyzębowych. Umożliwić swobodny przepływ wody pomiędzy zębami.

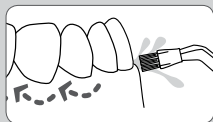

UŻYWANIE PŁYNU DO PŁUKANIA UST

Po użyciu dowolnej cieczy np. płyn do płukania jamy ustnej, należy przepłukać urządzenie. W tym celu napełnij zbiornik ciepłą wodą, skieruj końcówkę irygatora do umywalki, a następnie włącz urządzenie, aż do opróżnienia zbiornika.

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Zbiornik można zdjąć do czyszczenia. Jest on przystosowany do mycia w górnej części zmywarki do naczyń. Przed włożeniem zbiornika do zmywarki usuń zawór zbiornika.

USUWANIE OSADU Z TWARDEJ WODY

Aby pozbyć się osadu z twardej wody w wewnętrznych częściach irygatora należy dodać dwie łyżki białego octu do zbiornika wypełnionego ciepłą wodą i odczekać 5 min. Skierować końcówkę irygatora do umywalki i włączyć urządzenie, aż do opróżnienia zbiornika. Powtarzaj czynność do momentu, gdy woda przepływająca przez irygator będzie czysta.

Można również użyć specjalistycznego środka antybakteryjnego REDESEPT, stosując się do instrukcji dołączonej do opakowania.

Proces usuwania osadu należy wykonywać co najmniej raz na 1-3 miesiące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

WYCIEK WODY Z URZĄDZENIA

Jeżeli wyciek jest spowodowany uszkodzeniem węża. Wymienną rączkę z wężem można kupić na stronie dystrybutora www.shop-dent.pl

Jeżeli nastąpi wyciek ze zbiornika, upewnij się, że zawór jest prawidłowo zamontowany. Wymienny pojemnik z zaworem można zakupić na stronie dystrybutora www.shop-dent.pl

SERWIS I GWARANCJA (24 miesiące)

Urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Okres gwarancji, jakim jest objęte urządzenie, wynosi 24 miesiące. Do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Shop Dent Wojciech Madej naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z: Shop Dent Wojciech Madej ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa, tel. +48 112 38 18, e-mail: reklamacje@shop-dent.pl w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

waterpik®

Water Pik, Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
844-821-4873
www.waterpik.com

Waterpik, International, Inc.
Castle Court,
41 London Road Reigate,
Surrey RH2 9RJ
United Kingdom

Waterpik® jest znakiem towarowym firmy Water Pik, Inc. zarejestrowanym w Argentynie, Australii, krajach Beneluksu, Brazylii, Kanadzie, Chile, Chinach, Czechach, Danii, UE, Finlandii, Francji, Niemczech, Hongkongu, Węgrzech, Indiach, Izraelu, Włoszech, Japonii, Kazachstanie, Korei, Malesji, Meksyku, Nowej Zelandii, Norwegii, Pakistanie, Filipinach, Polsce, Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanie, Turcji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie.

Waterpik® (stylizowany) jest znakiem towarowym firmy Water Pik, Inc. zarejestrowanym w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, UE, Hongkongu, Indiach, Izraelu, Japonii, Korei, Malesji, Meksyku, Filipinach, Federacji Rosyjskiej, Arabii Saudyjskiej, Afryce Południowej, Szwajcarii, Tajwanie, Tajlandii, Trynidadzie i Tobago, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych i Wietnamie.

waterflosser®(stylizowany) jest znakiem towarowym firmy Water Pik, Inc. zarejestrowanym w Brazylii, Kanadzie, Chinach, Meksyku, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.

Pik Pocket® jest znakiem towarowym firmy Water Pik, Inc. zarejestrowanym w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Plaque Seeker® jest znakiem towarowym firmy Water Pik, Inc. zarejestrowanym w Kanadzie, Chinach, UE i Stanach Zjednoczonych.

Zaprojektowany i przetestowany w USA.
Wyprodukowano w Chinach.

Form No. 20025501-F AA

©2018 Water Pik, Inc.

CE