

Szczoteczka Brush-Baby KidzSonic 3-6 lat i 6+ lat

Co to jest szczoteczka KidzSonic?

Szczoteczka zaprojektowana specjalnie dla dziecka w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny u swoich pociech. Szczoteczka ładowana bateryjnie z małą główką oraz miękkim włosiem emituje 18 000 drgań na minutę, które delikatnie oraz dokładnie oczyszczają zęby i dziąsła. Szczoteczka KidzSonic wyposażona jest w 2 minutowy timer, podzielony na cztery 30-sekundowe ćwiartki, które pomagają w czyszczeniu i nabywaniu odpowiednich nawyków czyszczących od najmłodszych lat.

Jak używać szczoteczki KidzSonic?

- Zmocz włosie szczoteczki i nałóż pastę.
- Naciskając przycisk raz uruchomisz jedynie światło na końcówce szczoteczki, naciskając dwa razy uruchomisz ruchy drgające szczotki.
- Podziel łuki zębowe na cztery ćwiartki (górną, dolną, lewą i prawą).
- Zaczynij mycie zębów pamiętając o podzielonych łukach na ćwiartki. Delikatnie przyłóż włosie szczoteczki do powierzchni zębów a następnie wykonuj ruchy okrężne.
- Po 30 sekundach zmień ćwiartkę na nową (poinformuje Cię o tym zmiana krótka zmiana drgań po 30 sek.)
- Kiedy skończysz mycie zębów (umyjesz wszystkie cztery ćwiartki) wyłącz szczoteczkę naciskając przycisk.
- Szczoteczka KidzSonic wyłączy się sama po 2 minutach.

Jak czyścić szczoteczkę?

Zmocz włosie szczoteczki i pozostaw do wyschnięcia.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka sprawdzaj szczoteczkę przed każdym użyciem. Wymieniaj końcówkę czyszczącą jeżeli zobaczysz, że jest zużyta, zniszczona lub jest już w użyciu ponad 3 miesiące. Nie pozwalaj dziecku gryźć szczoteczki. Nie wkładaj szczoteczki pod wodę na dłuższy czas.

Szczoteczka BabySonic nie jest zabawką. Dziecko powinno jej używać wyłącznie pod kontrolą rodziców lub opiekunów. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wymiana końcówki czyszczącej

1. Aby zdjąć końcówkę: obróć rękojęść szczoteczki w lewo i pociągnij końcówkę czyszczącą do góry
2. Aby założyć końcówkę: nałóż końcówkę czyszczącą na rękojęść szczoteczki z włosiem skierowanym w prawą stronę, następnie obróć końcówkę czyszczącą w lewą stronę.

Wymiana baterii

1. Przekręć dolną część rękojęści w lewą stronę (zgodnie z ruchami wskazówek zegara)
2. Wyjmij zużyta baterie
3. Włóż nową baterię AAA
4. Nałóż dolną część rękojęści tak aby znaczniki na obudowie się pokryły, następnie przekręć dolną część rękojęści w prawą stronę.

Zasilanie szczoteczki KidzSonic


1. Wymagana bateria AAA 1,5V.
2. Używaj wyłącznie baterii alkaicznej.
3. Wyjmuj baterie kiedy nie używasz szczoteczki przez dłuższy czas.
4. Prawidłowo utylizuj zużyte baterie.

Specyfikacja szczoteczki KidzSonic

1. Włosie Du Pont
2. 18 000 drgań na minutę
3. 2-minutowy timer.
4. 30 sek. timer przypominający o zmianie mycia każdej ćwiartki.
5. Dostępne wymienne główki czyszczące.

Zawartość opakowania

1. 1x szczoteczka KidzSonic
2. 3x końcówki czyszczące
3. 1x bateria AAA
4. Instrukcja w języku polskim i angielskim

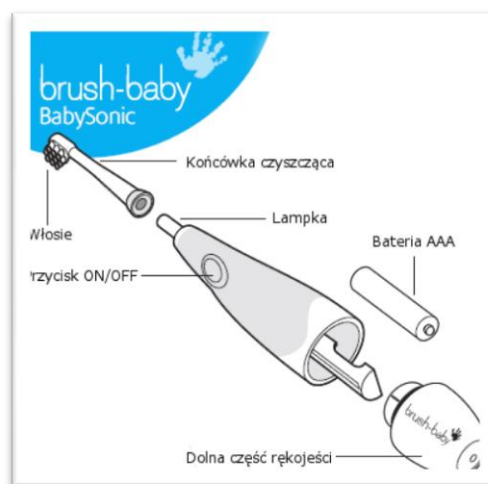

Gwarancja: Szczoteczka Brush-Baby BabySonic objęta jest **12 miesięczną** gwarancją producenta: Brushbaby Ltd., The Old Dairy, Ovington, Winchester, Hampshire, UK SO24 0RB

Producent: Brushbaby Ltd., The Old Dairy, Ovington, Winchester, Hampshire, UK SO24, www.brushbaby.co.uk, info@brushbaby.co.uk, international phone 00 44 (0)1962 733829

Wyłączny Dystrybutor w Polsce: ARS DENTAL Sp. z o.o., ul. Bychowska 51, 04-536 Warszawa www.arsdental.pl, info@arsdental.pl, +48 (22) 617-81-05

Szczoteczka soniczna Brush-Baby – GWARANCJA

A. WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

1. Gwarantem jakości urządzenia jest firma **Brushbaby Ltd., The Old Dairy, Ovington, Winchester, Hampshire, UK SO24 0RB.**
2. **Brushbaby Ltd.** gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy **Brushbaby Ltd.** odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
3. **Brushbaby Ltd.** ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie **12 miesięcy** od daty jego sprzedaży.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do dystrybutora firmy **Brushbaby Ltd.** na Polskę **ARS DENTAL Sp. z o. o., ul. Środkowa 1, 03-430 Warszawa.**
5. W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów prosimy kontaktować się bezpośrednio z działem reklamacji mailowo na adres: **reklamacje@arsdental.pl** lub telefonicznie pod numerem **+48 731-906-563.**
6. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną (w tym przypadku instrukcją), oryginalnym opakowaniem (jeżeli jest taka możliwość) oraz kompletnym wyposażeniem standardowym. Urządzenie powinno być dostarczone w stanie czystym.
7. Reklamowany produkt (**wraz z kompletem dokumentów oraz opisem problemu**) należy wysłać na następujący adres:

ARS DENTAL Sp. z o.o.
ul. Środkowa 1
03-430 Warszawa

B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

ARS DENTAL sp. z o.o. odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

- stwierdzenia użytkownika urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
- dostarczenia urządzenia brudnego lub urządzenia z niepełnym wyposażeniem standardowym,
- stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej.

C. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji. Ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: baterie, główki szczoteczki lub inne końcówki czyszczące.
2. Wady powstałe w wyniku procesu normalnego zużycia/użytkowania urządzenia. W szczególności wady takie jak – odpryski, zadrapania, otarcia, przebarwienia czy wytarcia.
3. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
4. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
6. Uszkodzenia powstałe w wyniku wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r, nr 141, poz. 1176).

.....
Sprzedawca (pieczęć firmowa)

Wypełnia sprzedawca:

Nazwa urządzenia:

Data sprzedaży:

Nr dowodu zakupu: