



PHILIPS

sonicare

9900 Prestige



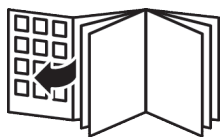

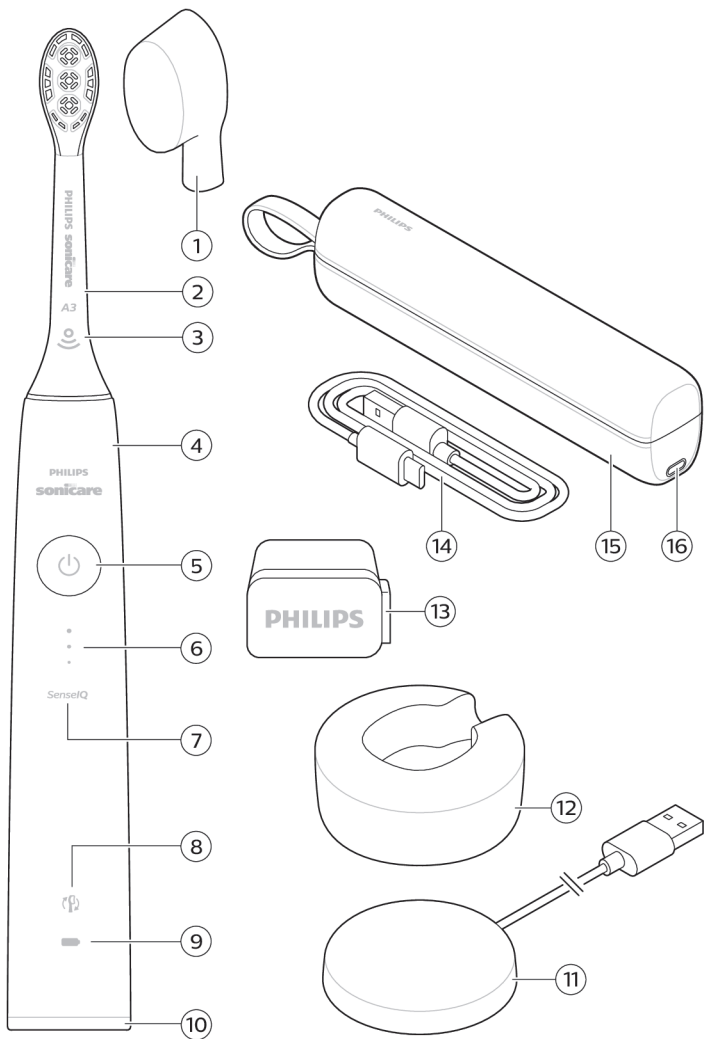

Wprowadzenie

Gratulujemy wyboru zaawansowanej szczoteczki sonicznej Philips Sonicare! Skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej, bielsze zęby i zdrowsze dziąsła są na wyciągnięcie ręki. Dzięki połączeniu zaawansowanej sonicznej technologii czyszczenia oraz funkcji opracowanych i przetestowanych w oparciu o badania kliniczne, szczoteczka Philips Sonicare zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie, za każdym razem. Dodatkowa pomoc techniczna i rejestracja produktu są dostępne pod adresem: www.philips.com/Prestige-Get-Started
Witamy w rodzinie Philips Sonicare!



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia

- Trzymaj ładowarki z dala od wody.
- Po zakończeniu czyszczenia, przed podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że ładowarka jest całkowicie sucha.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips. Stosuj wyłącznie ładowarkę dostarczoną z urządzeniem. Jeśli są w zestawie, należy używać tylko oryginalnego kabla USB i zasilacza USB.
- To urządzenie nie zawiera elementów, które można samodzielnie wymienić lub naprawić. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go i skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Jeśli przewód jest uszkodzony, wymień ładowarkę na nową.
- Nie używaj ładowarek na dworze ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy czyścić żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka.
- Nie używaj końcówki z połamanym lub wygiętym włosiem. Końcówkę szczoteczki wymieniaj co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia.
- Unikać kontaktu z produktami zawierającymi olejki eteryczne lub olej kokosowy. Kontakt może spowodować wypadnięcie włosów.
- Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z dentystą/lekarzem, jeśli po użyciu wystąpi nadmierne krwawienie, lub jeśli krwawienie nadal występuje po 1 tygodniu użytkowania albo wystąpi dyskomfort lub ból.
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed pierwszym użyciem urządzenia skonsultuj się ze stomatologiem.
- Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub producentem tego urządzenia.
- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie do higieny osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii i akumulatorów

- To urządzenie zawiera akumulatory, które może wyjmować jedynie odpowiednio przeszkolona osoba.
- Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips. Korzystaj jedynie z odłączanego zasilacza CBAyyyy, TCxxxx lub WAAxxxx.
- Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia i przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w odwrotny sposób.
- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Gdy skończy się czas eksploatacji akumulatora, urządzenie należy w odpowiedni sposób zutylizować, zobacz punkt dotyczący recyklingu.

- W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.
- Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.
- Ładuj produkt i używaj go w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

Warunki przechowywania i transportu

Temperatura od -10°C do 60°C.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego

Philips niniejszym oświadcza, że elektryczne szczoteczki do zębów z funkcją komunikacji radiowej (Bluetooth, NFC) są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

- Interfejs częstotliwości radiowej Bluetooth w odpowiednich produktach działa z częstotliwością 2,4 GHz.
- Maksymalna moc wyjściowa urządzenia Bluetooth wynosi 3 dBm.
- Interfejs częstotliwości radiowej NFC w odpowiednich produktach działa z częstotliwością 13,56 MHz.
- Maksymalna moc fal radiowych wysyłanych przez urządzenie wynosi 30,16dBm.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.philips.com/support

Uwaga: Funkcje różnych modeli urządzenia mogą być różne. Niektóre modele mogą nie być wyposażone w interfejs Bluetooth lub NFC.

Przeznaczenie

Elektryczne szczoteczki do zębów Sonicare Prestige służą do usuwania z zębów przylegającej do nich płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych. Pozwala to zminimalizować próchnicę oraz poprawić i utrzymywać higienę jamy ustnej. Elektryczne szczoteczki do zębów Prestige są przeznaczone do użytku domowego. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci, jeżeli zapewniony zostanie nadzór przez osobę dorosłą.

Twoja szczoteczka Philips Sonicare


- 1 Higieniczna nasadka na podróż
- 2 Końcówka Premium All-in-One (A3)
- 3 Symbol BrushSync
- 4 Uchwyt
- 5 Przycisk włączania / wyłączenia
- 6 Wskaźnik intensywności i ukryty przycisk
- 7 Wskaźnik SenseIQ
- 8 Wskaźnik przypominający o wymianie końcówki
- 9 Wskaźnik poziomu baterii
- 10 Wskaźnik dostarczający informacji zwrotnych na temat szczotkowania
- 11 Podstawa ładująca
- 12 Podstawka ładująca
- 13 Zasilacz sieciowy USB-A
- 14 Przewód USB-C
- 15 Ładujące etui podróżne
- 16 Gniazdo USB-C

Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić w zależności od modelu.

Na produkcie mogą być widoczne następujące symbole:



Przeczytaj instrukcję obsługi.

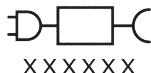

Odłączany zasilacz: „xxxxxx” wskazuje numer modelu zatwierdzonych ładowarek, których można używać.

Aplikacja Sonicare — pierwsze kroki

Aplikacja Sonicare łączy się z Twoją szczoteczką, co pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniami. Połączenie szczoteczki Philips Sonicare z Twoim kontem w aplikacji Sonicare pozwoli na:

- Dostosowanie ustawień szczoteczki w oparciu o preferowane programy czyszczenia, intensywności oraz zebrane informacje na temat techniki szczotkowania.
- Śledzenie postępów.
- Otrzymywanie spersonalizowanych wskazówek i zaleceń, które pomogą poprawić zdrowie jamy ustnej.
- Dostęp do pełnego zakresu korzyści oraz najnowszych aktualizacji dla pełnego doświadczenia szczoteczki Philips Sonicare Prestige.

Aplikacja jest kompatybilna z wieloma smartfonami iPhone i smartfonami z systemem Android™. Więcej informacji jest dostępnych na stronie

www.philips.com/Prestige-Get-Started

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Sonicare:





- 1 Pobierz aplikację Sonicare na swój telefon.
- 2 Upewnij się, że w telefonie włączona jest funkcja Bluetooth.
- 3 Podnieś szczoteczkę do zębów, aby upewnić się, że jest aktywna (wskaźniki włączone).
- 4 Włącz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją.
- 5 Sparuj szczoteczkę z aplikacją.
- 6 Utwórz konto za pośrednictwem aplikacji. Zaktualizuj oprogramowanie, w razie pojawienia się monitu, dzięki czemu uzyskasz dostęp do najnowszych uprawnień i funkcji.
- 7 Szczotkuj zęby regularnie. Wszystko gotowe. Możesz już zacząć szczotkować z użyciem aplikacji. Regularnie synchronizując szczoteczkę z aplikacją otrzymasz uaktualnienia, które pomogą Ci poprawić zdrowie jamy ustnej.
- 8 Synchronizuj regularnie.
 - **Aby dokonywać synchronizacji ręcznie:** Paruj/łącz swoją szczoteczkę z aplikacją co kilka tygodni, aby doświadczyć wszystkich korzyści z jej funkcji/możliwości.
 - **Aby dokonywać synchronizacji automatycznie:** Podczas konfigurowania aplikacji udziel zezwolenia na udostępnianie informacji o lokalizacji. Dzięki udostępnieniu informacji o lokalizacji, Twój telefon będzie wiedział, kiedy znajdzie się w zasięgu łączności z twoją szczoteczką, co pozwoli na odświeżenie informacji na temat szczotkowania w aplikacji, a tym samym zaprezentowanie najświeższych spostrzeżeń oraz zaleceń.

Uwaga: Upewnij się, że podczas korzystania z aplikacji funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona, aby szczoteczka do zębów mogła przysyłać dane dotyczące szczotkowania do aplikacji i aktualizować je. W razie wątpliwości dotyczących powodów zbierania tych danych zapoznaj się z oświadczeniem dotyczącym prywatności dostępnym podczas konfigurowania aplikacji.


Aplikacja — funkcje

Aplikacja Sonicare umożliwia personalizację ustawień szczoteczki do zębów zgodnie z Twoimi preferencjami — można m.in. skonfigurować:

- Ustawienia intensywności
- Programy czyszczenia
- Włączanie i wyłączanie intensywności adaptacyjnej
- Włączanie i wyłączanie informacji nt. szorowania


Końcówka

Elektryczna szczoteczka do zębów Philips Sonicare Prestige posiada nową końcówkę Premium All-in-One (A3). Ta końcówka jest specjalnie zaprojektowana tak, aby zapewnić skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej, usuwanie przebarwień oraz zdrowsze dziąsła.

Końcówki Premium All-in-One posiadają technologię BrushSync (patrz opis poniżej), na co wskazuje symbol  widoczny w jej dolnej części.


Aby poznać wszystkie końcówki, odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informacji:

www.philips.com/toothbrush-heads

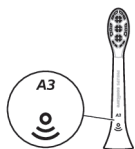

Używanie szczoteczki Philips Sonicare


Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów

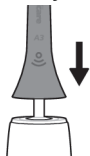

- 1 Nałóż końcówkę szczoteczki na uchwyt.



Uwaga: Między końcówką a uchwytem jest niewielka przerwa — jest to normalne i zgodne z projektem urządzenia. Umożliwia to prawidłowe drgania końcówki.

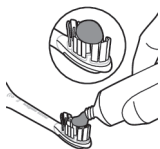

- 2 Zwilż włókno znajdujące się na końcówce i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.




- 3 Umieść szczoteczkę na zębach pod niewielkim kątem (45 stopni). Lekko dociśnij szczoteczkę w taki sposób, aby włókna dotykały linii dziąsła lub trochę poniżej.

Uwaga: Środkowa część końcówki powinna przez cały czas dotykać zębów.



- 4 Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia, aby uruchomić szczoteczkę Philips Sonicare.

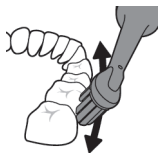


- 5 Dla najlepszych efektów nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno (stosuj lekki nacisk) i pozwól szczoteczce Philips Sonicare szczotkować za Ciebie.



Uwaga: Włókna nieznacznie się wyginają. Nie szoruj. Zmiana w poziomie drgań i aktywacja migającego na fioletowo wskaźnika informują o zbyt dużej sile nacisku podczas szczotkowania.

Delikatnie i powoli przesuwaj końcówkę wzdłuż zębów, minimalnie poruszając nią do przodu i do tyłu. Dzięki temu dłuższe włókna lepiej dotrą do przestrzeni pomiędzy zębami. Kontynuuj ten ruch przez cały cykl szczotkowania.

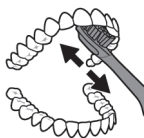

- 6 Aby oczyścić wewnętrzne powierzchnie przednich zębów, ułóż szczoteczkę pionowo, pod lekkim kątem i wykonaj kilka pionowych, nakładających się na siebie ruchów szczotkujących na każdym zębie.



- 7 Funkcja BrushPacer dzieli czas szczotkowania na sześć równych segmentów i wskazuje, kiedy należy przejść do kolejnego obszaru. Krótka przerwa w wibracjach sygnalizuje początek kolejnego segmentu. Po zakończeniu sesji szczotkowania szczoteczka automatycznie się wyłącza.

Uwaga: Szczoteczka Philips Sonicare jest bezpieczna dla osób z aparatem ortodontycznym, uzupełnieniami protetycznymi, licówkami i koronami.


Programy czyszczenia

Twoja szczoteczka jest fabrycznie ustawiona na uniwersalny program czyszczenia. Również, w ramach tego programu czyszczenia, szczoteczka odmierza dokładnie 2 minuty rekomendowane przez dentystów, jak również dzieli jamę ustną na sześć segmentów, informując o przejściu do kolejnego segmentu poprzez przerwę w wibracjach.

Program czyszczenia możesz spersonalizować z poziomu aplikacji Sonicare (patrz „Aplikacja Sonicare — pierwsze kroki”).


Uwaga: Chociaż program czyszczenia nie jest wyświetlany na uchwycie szczoteczki, możesz go zaktualizować w dowolnym momencie z poziomu aplikacji Sonicare, a dokonany wybór zostanie zapisany.

Ustawienia intensywności

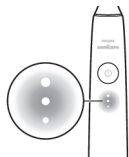

Twoja szczoteczka oferuje wybór trzech poziomów intensywności:


- Wysoki poziom intensywności (trzy światelka)
- Średni poziom intensywności (dwa światelka)
- Niski poziom intensywności (jedno światelko)

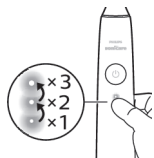


Aby ręcznie wybrać poziom intensywności, naciśnij świetlne wskaźniki intensywności na uchwycie, aby przełączać się pomiędzy opcjami. Ustawienie intensywności można zmienić przed szczotkowaniem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu.

Uwaga: Ustawienie intensywności można również dostosować z poziomu aplikacji Sonicare.

Technologia BrushSync

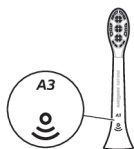

Dzięki technologii BrushSync końcówka komunikuje się z uchwycem, wykorzystując mikrochip. Symbol  u dołu końcówki wskazuje, że jest ona wyposażona w tę technologię.


Technologia BrushSync umożliwia:

- Przypomnienie o wymianie końcówek
- Parowanie w trybie BrushSync (w przypadku końcówek Tongue Care)

Funkcje

- SenseIQ
- Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku
- Dostosowywanie intensywności szczotkowania
- Informacje zwrotne na temat szorowania
- BrushPacer
- Przypomnienie o wymianie końcówki

SenseIQ

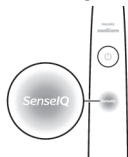

Szczoteczka do zębów Sonicare jest wyposażona w technologię SenseIQ stanowiącą połączenie inteligentnych funkcji, które obserwują Twoją technikę szczotkowania (np. ruchy, nawyki, wybór końcówek) i zapewniają spersonalizowane informacje zwrotne i zalecenia.

Funkcje SenseIQ obejmują:

- Dostosowywanie intensywności szczotkowania
- Dostarczanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym:
 - Informacje zwrotne na temat szorowania
 - Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku
- Spersonalizowane zalecenia (w aplikacji)

- Informacja zwrotna na temat techniki szczotkowania (w aplikacji)

Ikona technologii SenseIQ na uchwycie zaświeci się, gdy inteligentne funkcje są aktywne:

- podczas szczotkowania
- aby potwierdzić włączanie i wyłączenie ustawień

Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku



Szczoteczka Philips Sonicare śledzi nacisk podczas szczotkowania, aby chronić Twoje dziąsła i zęby.

Jeśli będziesz naciskać zbyt mocno, szczoteczka zmieni sposób wibracji, a na dolnej części jej uchwytu zaświeci się ikona (na fioletowo) do czasu, aż zmniejszysz nacisk.

Uwaga: W ramach ustawień fabrycznych szczoteczki, czujnik nacisku jest aktywny. Informacje dotyczące wyłączenia tej funkcji znajdują się w części „Włączanie i wyłączenie funkcji”.

Intensywność adaptacyjna

Twoja szczoteczka posiada funkcję intensywności adaptacyjnej, dzięki której chroni Twoje dziąsła. Jeśli siła nacisku będzie przez dłuższy czas zbyt duża, szczoteczka do zębów automatycznie zmniejszy intensywność szczotkowania o 1 poziom. Zauważysz krótką przerwę w przekazywaniu informacji zwrotnych na temat siły nacisku i poczujesz, że intensywność ulegnie zmniejszeniu.

Uwaga: W ramach ustawień fabrycznych szczoteczki, intensywność adaptacyjna jest aktywna. Informacje dotyczące wyłączenia tej funkcji znajdują się w części „Włączanie i wyłączenie funkcji”.

Uwaga: W każdym nowym cyklu szczotkowania intensywność powróci do wstępnie ustawionego poziomu.

Informacje zwrotne na temat szorowania

Szczoteczka do zębów Philips Sonicare mierzy ruchy wykonywane podczas szczotkowania w celu wykrycia szorowania (opis optymalnej techniki zamieszczono w instrukcji szczotkowania). Jeśli regularnie szorujesz zęby podczas szczotkowania, aplikacja zaleci Ci włączenie



funkcji przekazywania informacji zwrotnych na temat szorowania.

Po włączeniu tej funkcji wskaźnik informacji zwrotnych na temat szczotkowania znajdujący się w dolnej części uchwytu będzie świecić się na bursztynowo i nastąpi zmiana w poziomie wibracji, aby przypomnieć o zaprzestaniu szorowania. Wskaźnik informacji zwrotnych na temat szorowania wyłączy się, jak tylko przestaniesz szorować.

Uwaga: W nowo zakupionym produkcie funkcja przekazywania informacji zwrotnych na temat szorowania jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w części „Włączanie i wyłączanie funkcji”.

Funkcja BrushPacer



Funkcja BrushPacer dzieli czas szczotkowania na sześć równych segmentów i wskazuje, kiedy należy przejść do kolejnego obszaru. Krótka przerwa w wibracjach sygnalizuje początek kolejnego segmentu. Po zakończeniu sesji szczotkowania szczoteczka automatycznie się wyłączy.

Uwaga: Podczas korzystania z programów czyszczenia White+ i Gum Health mogą zostać dodane dodatkowe segmenty. Opis programów czyszczenia znajdziesz w aplikacji Sonicare.


Przypomnienie o wymianie końcówki

Szczoteczka do zębów Philips Sonicare będzie śledzić zużycie końcówki, wykorzystując technologię BrushSync do pomiaru następujących parametrów:

- Całkowity nacisk stosowany podczas szczotkowania
- Łączny czas szczotkowania przy użyciu danej końcówki

Po zużyciu końcówki, wskaźnik przypominający o wymianie zacznie migać na bursztynowo, a uchwyt wyemituje serię różnych sygnałów dźwiękowych, aby zasignalizować, że nadszedł już czas na wymianę.

Uwaga: W ramach ustawień fabrycznych szczoteczki, funkcja przypomnienia o wymianie końcówki jest

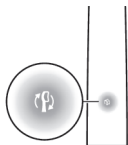

aktywna. Informacje dotyczące wyłączania tej funkcji znajdują się w części „Włączanie i wyłączanie funkcji”.

Włączanie i wyłączanie funkcji

Można włączać i wyłączać następujące funkcje szczoteczki:

- Intensywność adaptacyjna
- Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku
- Informacje zwrotne na temat szorowania
- Przypomnienie o wymianie końcówki

Uwaga: Gdy czujnik nacisku jest wyłączony, wówczas funkcja intensywności adaptacyjnej również będzie wyłączona.

Z poziomu aplikacji

Z poziomu aplikacji Sonicare można włączać i wyłączać następujące funkcje:

- Intensywność adaptacyjna
- Informacje zwrotne na temat szorowania

Instrukcje dotyczące łączenia się z aplikacją (patrz „Aplikacja Sonicare — pierwsze kroki”).

Z poziomu uchwytu

Czynność 1: Umieść uchwyt szczoteczki na podstawie ładującej.



Czynność 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez:

Intensywność adaptacyjna

Przypomnienie o wymianie końcówki

Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku

Maksymalnie 3 sekundy

Maksymalnie 5 sekund

Maksymalnie 7 sekund



Czynność 3: Zwolnij przycisk zasilania, gdy usłyszysz

1 sygnał
dźwiękowy

1, a następnie 2
sygnały
dźwiękowe

1, 2, a następnie 3
sygnały dźwiękowe



Wskaźnik
SenseIQ zapala
się na 3 sekundy

Wskaźnik
przypominający
o wymianie
końcówki zapala
się na 3 sekundy

Wskaźnik SenseIQ i
pierścień świetlny
zapalają się na fioletowo
na 3 sekundy

Ponadto:



Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zamiga 3 razy na biało i rozlegną się 3 coraz wyższe dźwięki, oznacza to, że funkcja została włączona.


LUB




Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zamiga 3 razy na bursztynowo i rozlegną się 3 coraz niższe dźwięki, oznacza to, że funkcja została wyłączona.

Ładowanie i stan akumulatora


Ładowanie w ładowarce

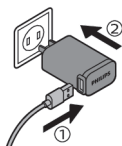

- 1 Podłącz przewód USB podstawy ładującej do zasilacza sieciowego USB i podłącz ten zasilacz do gniazdka elektrycznego.

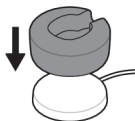

- 2 Umieść bazę ładującą (przezroczysta pokrywa) na podstawie ładującej.

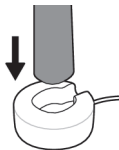


- 3 Umieść uchwyt szczoteczki do zębów w ładowarce.





- a Aby pokazać, że ładowanie rozpoczęło się pomyślnie, szczoteczka do zębów wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźniki zaświecą się po kolei, zaczynając od dolnego, a skończywszy na górnym.
 - b Podczas ładowania wskaźnik akumulatora miga na biało.
- 4 Pozostaw szczoteczkę do zębów w ładowarce, aż zostanie w pełni naładowana. Lampka akumulatora wyłączy się (przestanie migać), gdy uchwyt skończy się ładować.

Uwaga: Pełne naładowanie szczoteczki Philips Sonicare może potrwać do 16 godzin.

Ładowanie za pomocą etui podróżnego

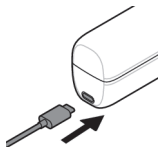

- 1 Podłącz przewód USB do etui podróżnego i do zasilacza sieciowego USB.
- 2 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

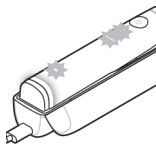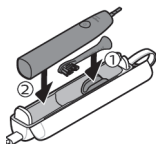


3 Umieścić szczoteczkę do zębów w etui podróżnym.

- Aby pokazać, że ładowanie rozpoczęło się pomyślnie, szczoteczka do zębów wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźniki zaświecą się po kolei, zaczynając od dolnego, a skończywszy na górnym.
- Podczas ładowania wskaźnik akumulatora miga na białą.

4 Etui podróżne powinno pozostać podłączone do sieci elektrycznej aż do pełnego naładowania szczoteczki. Lampka akumulatora wyłączy się (przestanie migać), gdy uchwyt skończy się ładować.

Uwaga: Upewnij się, że etui podróżne leży na boku, aby zapewnić jego większą stabilność.

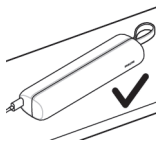

Stan akumulatora (gdy uchwyt znajduje się w działającej ładowarce lub w działającym etui podróżnym)

Po umieszczeniu uchwytu w ładowarce lub etui podróżnym wskaźnik akumulatora poinformuje o jego aktualnym poziomie naładowania.

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik akumulatora
Ładowanie	Miga na białą
W pełni naładowany	Świeci na białą przez 30 sekund, a potem się wyłącza.

Stan akumulatora (gdy uchwyt nie znajduje się na ładowarce)

Po włączeniu szczoteczki wskaźnik naładowania akumulatora znajdujący się w dolnej części uchwyty pokazuje stan jego naładowania.


Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik akumulatora	Dźwięk
W pełni naładowany	Podświetlony na biało	-
Częściowo naładowany	Miga na biało	-
Niski poziom naładowania	Miga na bursztynowo	Po zakończeniu szczotkowania uchwyt emituje 3 sygnały dźwiękowe
Wyładowany	Miga na bursztynowo	Po zakończeniu szczotkowania uchwyt emituje 2 zestawy sygnałów dźwiękowych

Czyszczenie


Końcówka i uchwyt szczoteczki


Końcówki i uchwyt szczoteczki można czyścić, płuczac je ciepłą wodą.

- 1 Zdejmij końcówkę z uchwyty, a następnie dokładnie opłucz ją wodą.

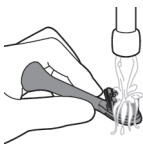

- 2 Opłucz cały uchwyt, a szczególną uwagę zwróć na miejsce nałożenia końcówki. Okolicę gumowej uszczelki czyść delikatnie. Co najmniej raz w tygodniu.

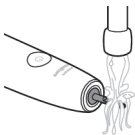

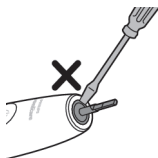

Uwaga: Nie naciskaj gumowej uszczelki w górnej części uchwytu.

Etui podróżne i ładowarka

- 1 Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki i etui podróżnego odłącz je od zasilania.
- 2 Wyczyść powierzchnię ładowarki i etui podróżnego wilgotną szmatką.

Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem czyszczenia zasilacza sieciowego USB i ładowarek odłącz je od zasilania.

Uwaga:

- Nie należy czyścić produktu ani akcesoriów do niego w zmywarce do naczyń.
- Nie należy również używać do tego celu alkoholu izopropylowego, octu, wybielacza ani żadnych innych domowych środków czystości, ponieważ może to spowodować odbarwienie produktu lub akcesoriów.
- Przed włożeniem do etui podróżnego końcówki i szczoteczki do zębów upewnij się, że są suche.
- Nie używaj olejków eterycznych do czyszczenia końcówki, szczoteczki do zębów i akcesoriów do niej, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Przechowywanie

Jeśli zamierzasz nie używać produktu przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego, wyczyść i umieść w chłodnym i suchym miejscu, w którym nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisaliśmy najczęściej pojawiające się wątpliwości podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie mogę w pełni zamocować końcówki. Między końcówką a uchwytem jest niewielka przerwa.		Ta niewielka przerwa jest zupełnie normalna. Dzięki niej końcówka szczoteczki wibruje prawidłowo.
Wibracje mojej szczoteczki do zębów Philips Sonicare są słabsze niż kiedyś.	Włączona została funkcja intensywności adaptacyjnej, włączona została funkcja czujnika siły nacisku (patrz „Informacje zwrotne z czujnika siły nacisku”) lub poziom intensywności został zmieniony przez przypadek.	Wyłącz funkcję intensywności adaptacyjnej i/lub funkcję czujnika siły nacisku (patrz „Włączanie i wyłączanie funkcji”) i/lub zmień poziom intensywności, przesuwając świetlny wskaźnik intensywności do wybranego poziomu (patrz „Ustawienia intensywności”).
W opakowaniu brakuje części lub akcesoriów.	Brakujące części lub akcesoria nie są dołączane w zestawie do zakupionego modelu.	Dołączane akcesoria oraz liczba końcówek zależy od numeru zakupionego modelu. Numer modelu HX znajdziesz na dole uchwytu — to pomoże Ci dowiedzieć się, jakie elementy są dołączane wraz ze szczoteczką.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

WYJĄTKI OD GWARANCJI

Co nie jest objęte gwarancją:

- Elementy umieszczone w jamie ustnej, w tym główki szczotkujące oraz nasadki.
- Uszkodzenia spowodowane użyciem nieautoryzowanych części zamiennych lub nieautoryzowanych główek szczoteczek.