













PROFESSIONAL
CARE

powered
by **BRAUN**

OXYJET



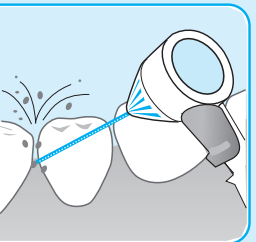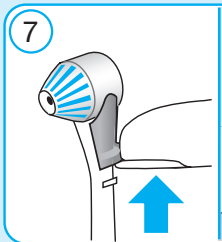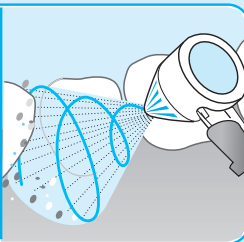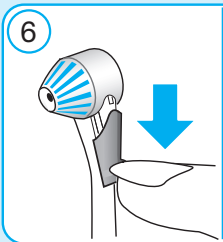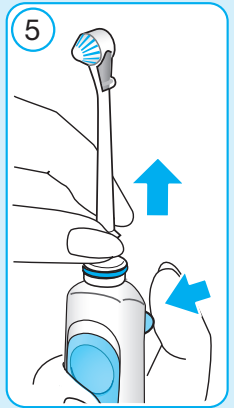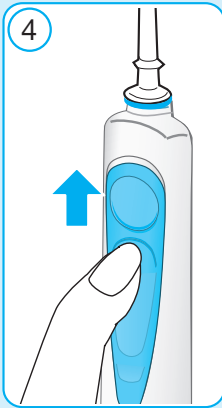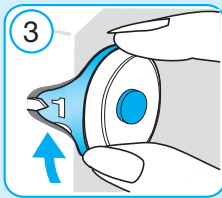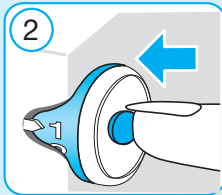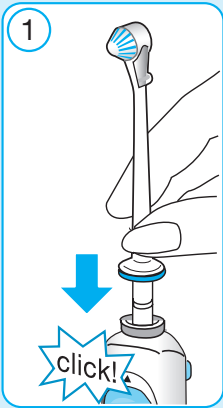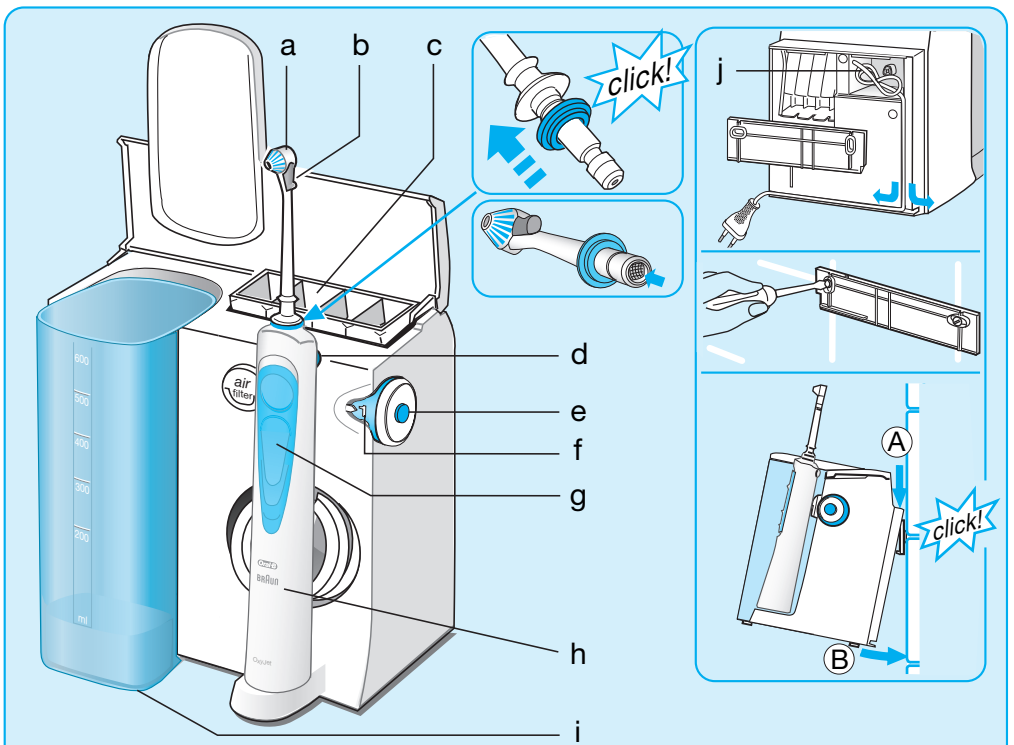

Polski

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

Uwaga

- Zamontuj urządzenie w miejscu uniemożliwiającym kontakt z wodą lub upadek na podłogę. Wtyczka sieciowa powinna być zawsze łatwo dostępna.
- Okresowo sprawdzaj, czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony oddaj ładowarkę do Centrum Serwisowego Oral-B Braun. Nie wolno używać uszkodzonego lub niesprawnego urządzenia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci poniżej 12 roku życia.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, jeżeli nie są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zaleca się przechowywać produkt z dala od dzieci.
- Jeżeli urządzenie jest użytkowane przez dzieci, należy je nadzorować, aby upewnić się, że nie wykorzystują go do zabawy.
- Nie należy umieszczać bądź przechowywać ładowarki w miejscu, z którego może zostać strącona do wanny bądź umywalki.
- Nie wolno umieszczać ładowarki w wodzie lub innych cieczach.
- Jeżeli ładowarka wpadnie do wody, nie należy po nią sięgać. Należy niezwłocznie odłączyć ją od zasilania.
- Nie należy samemu modyfikować i naprawiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem bądź inne obrażenia. W sprawie jakichkolwiek napraw prosimy skontaktować się z dostawcą lub z Centrum Serwisowym Oral-B Braun. Nie rozmontowywać produktu, poza przypadkiem, kiedy usuwana jest bateria.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w którykolwiek z otworów urządzenia/ładowarki.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Podczas rozłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za przewód.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Nie wolno używać końcówek lub zasilaczy niezalecanych przez producenta.
- Jeżeli użytkownik jest w trakcie leczenia stomatologicznego, przed użyciem irygatora należy skonsultować się ze swoim lekarzem stomatologiem.

Opis

- a Dysza irygatora
- b Przełącznik
- c Pojemnik na dysze
- d Przycisk zwalnający dysze irygatora
- e Włącznik/wyłącznik

- f Pokrętko regulacji ciśnienia wody
- g Suwak otwierający zawór
- h Rączka irygatora
- i Zbiornik na wodę (600 ml)
- j Miejsce na kabel sieciowy

Dane techniczne

Informacje dotyczące wymaganego napięcia znajdują się na dolnej części bazy ładującej.

Obsługa irygatora

Przed pierwszym użyciem irygatora napełnij zbiornik (i), następnie trzymając irygator (h) nad umywalką, włącz przepływ wody i odczekaj, aż wyczerpie się woda ze zbiornika.

1. Na uchwyt irygatora załóż jedną z dysz (a) i dociśnij, aż nastąpi kliknięcie (1). Napełnij zbiornik ciepłą wodą. W razie potrzeby można dodać płynu do płukania jamy ustnej.
2. Uruchom irygator za pomocą włącznika/wyłącznika (e) (2). (Suwak otwierający zawór powinien być wówczas w dolnej pozycji = zamknięty wypływ wody).
3. Ustaw ciśnienie wody przy użyciu pokrętki (f) (1 = minimum, 5 = maksimum) (3). Zaleca się, aby początkowo ustawić pokrętko w pozycji 1, zwłaszcza, jeżeli dziąsła mają skłonność do krwawienia lub gdy z irygatora korzystają dzieci.
4. Pochyl się nad umywalką i umieść dyszę w jamie ustnej. Przesuń umieszczony w uchwycie suwak otwierający zawór (g) i rozpocznij płukanie (4). Podczas płukania należy lekko rozchylić usta tak, aby woda mogła swobodnie wypływać do umywalki.

Dysza wyposażona jest w dwupozycyjny przełącznik rodzaju strumienia wody (b). Przed przełączeniem rodzaju strumienia należy wyłączyć przepływ wody przy pomocy suwaka otwierającego zawór.

Strumień wirujący do czyszczenia zębów i masażu dziąseł (przełącznik dyszy w pozycji dolnej): Wirujący strumień wody z mikrobąbelkami z łatwością wnika w przestrzenie międzyzębowe i delikatnie masuje dziąsła (6).

Strumień skupiony (przełącznik dyszy w pozycji górnej): Prosty strumień wody do czyszczenia punktowego (7).

Maksymalny czas pracy: 15 minut
Czas stygnięcia: 2 godziny

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania dysz, w dolnej części trzonka znajduje się sitko. W przypadku zmniejszonego ciśnienia wody należy zwrócić uwagę, czy w sitku nie zgromadził się osad.

Jeżeli tak, należy go usunąć poprzez delikatne opukanie trzonka o płaską powierzchnię.

Po użyciu

Po każdym użyciu należy całkowicie opróżnić pojemnik na wodę, gdyż w pozostawionym płynie mogłyby rozwijać się bakterie. Jeżeli stomatolog zalecił płukanie jamy ustnej roztworem chlorheksydyny to, aby zapobiec tworzeniu się osadu, po każdym użyciu należy przepuścić czystą wodę przez irygator.

W celu wyłączenia irygatora należy nacisnąć przycisk włącznika/wyłącznika.

Aby zdjąć dyszę, trzeba użyć przycisku zwalniającego blokadę (d) (5). Dysze można przechowywać w pojemniku (c). Po użyciu wytrzeć do sucha uchwyt irygatora i odłożyć na podstawę.

Czyszczenie urządzenia

Obudowę należy regularnie przecierać wilgotną szmatką. Pojemnik na wodę oraz pojemnik na dysze można wyjmować i myć w zmywarce.

Zastrzega się możliwość zmian poniższych informacji.

Uwagi dotyczące ochrony środowiska

Niniejszy produkt zawiera akumulator.

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można wyrzucać łącznie z odpadami socjalnymi. Zużyty produkt należy zostawić w autoryzowanym serwisie Oral-B Braun lub w jednym z punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego. Odpowiednie przetworzenie zużytego sprzętu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko lub zdrowie ludzi, wynikającym z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.



Warunki gwarancji

1. Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. lub skorzysać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w

opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczty Polską lub firmy kurierskie.

4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 6.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;
 - c) części szklane, żarówki oświetlenia.
9. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
W celu wykonania naprawy gwarancyjnej kompletne urządzenie, wraz z dowodem zakupu, należy dostarczyć lub wysłać do autoryzowanego serwisu Oral-B Braun.